

余剰麻醉ガス検知器 SN-487-55



ご要望にお応えして、麻醉ガス回収フィルターの交換をアラームでお知らせする、余剰麻醉ガス検知器をご用意しました。従来の重さ(200g増量)による交換の場合、誤って交換限度を超えたまま使用し続けることがありましたが、この検知器を利用することにより、確実な交換時期が分かりやすくなります。ご利用中の弊社製の麻醉装置や回収装置への組み込みできますので、場所も取りません。


使用電源: AC100V



実験動物麻醉装置SN-487-0T Air
回収機能付きへの組み込み



卓上型麻醉ガス回収装置 SN-489-4
への組み込み

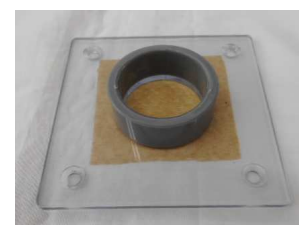

麻醉ガス回収フィルター
用容器 SN-487-60用ホ
ルダー(オプション)
すでに回収機能付きの
麻醉装置のご使用の場
合は不要です。

麻醉ガス回収フィルター




麻醉ガス回収フィルター用容器

SN-487-60
 接続コネクタ付き
 φ125×H190mm
 分解・洗浄可能



ご使用前に吸着剤の入った容器の重さを計り、容器背面の記録欄へ記載してください。

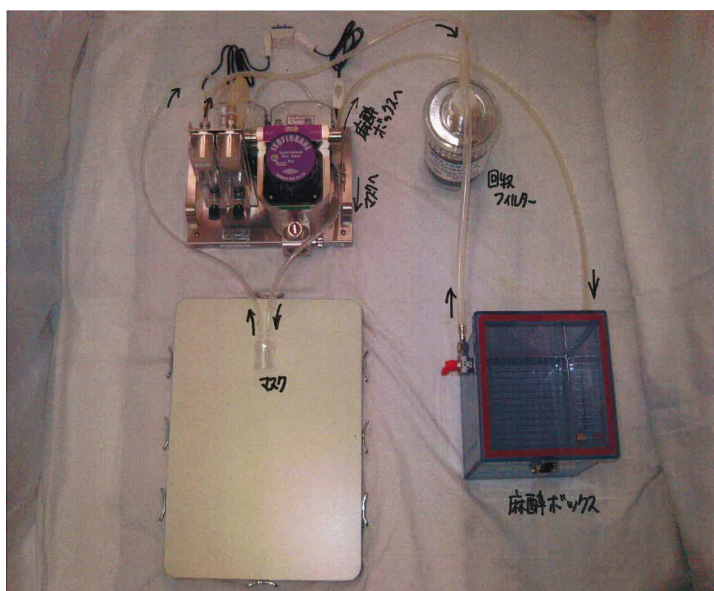

麻醉ガス回収フィルター吸着剤
 SN-487-61 10袋入り
 吸着能力: 約200g/1袋

※ 本製品は、実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp