

## 卓上型麻酔ガス回収装置 SN-489-4



大きさ: W135 × D130 × H365mm

麻酔装置のガス供給流量に合わせ、  
0～1リットル/min もしくは  
0.5～5リットル/minをお選びください。

マスクへの麻酔ガス供給を吸引・回収するための装置です。  
処置中での麻酔ガス吸引事故を防ぐためには、吸引・回収が必要不可欠です。この商品は、回収機能の付いていない麻酔装置に用います。装置には回収容器が付属されています。別途、専用の吸着剤(SN-487-61)をご購入ください。



マスク吸引ホース接続口



麻酔ボックスより  
ガス回収

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp

## 麻醉ガス回収フィルター




### 麻醉ガス回収フィルター用容器

SN-487-60  
 接続コネクター付き  
 $\phi 125 \times H190\text{mm}$   
 分解・洗浄可能



ご使用前に吸着剤の入った容器の重さを計り、容器背面の記録欄へ記載してください。

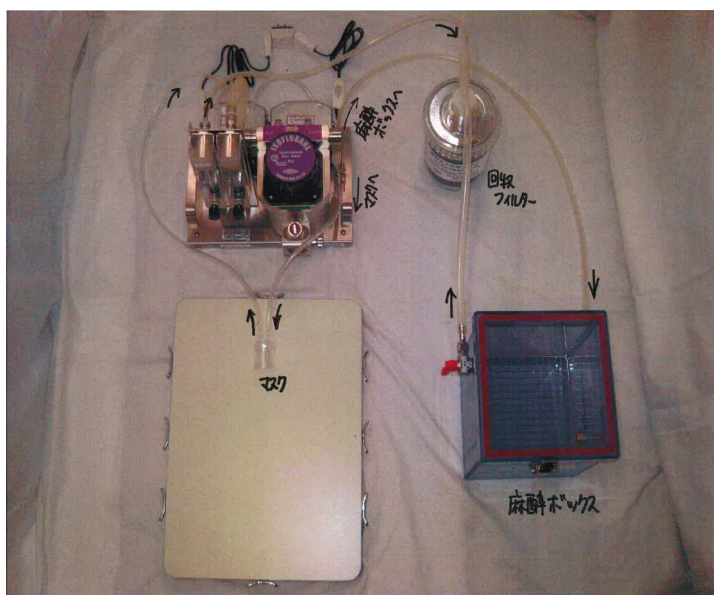

麻醉ガス回収フィルター吸着剤  
 SN-487-61 10袋入り  
 吸着能力: 約200g/1袋

※ 本製品は、実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ 製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話: 03-3814-8538

FAX: 03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp