


## ディスポマウス飼育ケージ



SN-798D



SN-800D

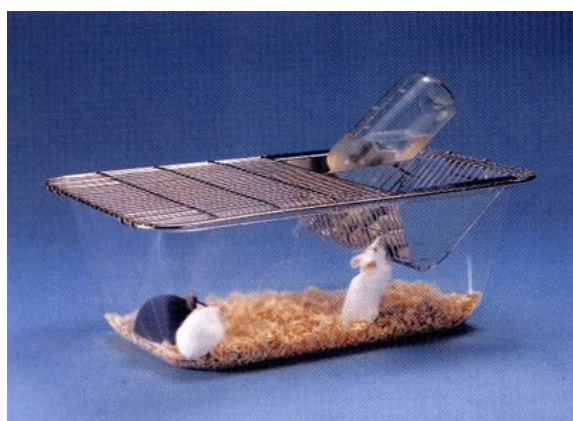

SN-802D

SN-798D 40入  
サイズ:W200×D130×H110mm

SN-800D 40入  
サイズ:W250×D185×H130mm

SN-802D 20入  
サイズ:W335×D225×H135mm

従来の実験用マウスの育成に伴う煩雑な洗浄作業及び滅菌作業を研究者の手から完全に解放した滅菌済みディスポーザブルマウスケージです。

これにより、微生物的に清浄な環境の中で動物実験を行うことが従来より容易になるばかりでなく、発癌物質、アイソトープを用いる動物実験、あるいは、感染実験などに伴う汚物やケージの処理に大きな便宜と安全性をもたらします。

特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く燃焼時に有害なガスの発生がないので床敷きを入れたまま焼却が出来ます。

使用されている特殊ポリエステルは、耐放射、電子線素材です。

完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません。

使用されている特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます。

【仕様】ケージ本体:材質 特殊ポリエステル製

特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60℃以上でのガス滅菌は避けてください。

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp