


ディスプレイラット飼育ケージ SN-805D

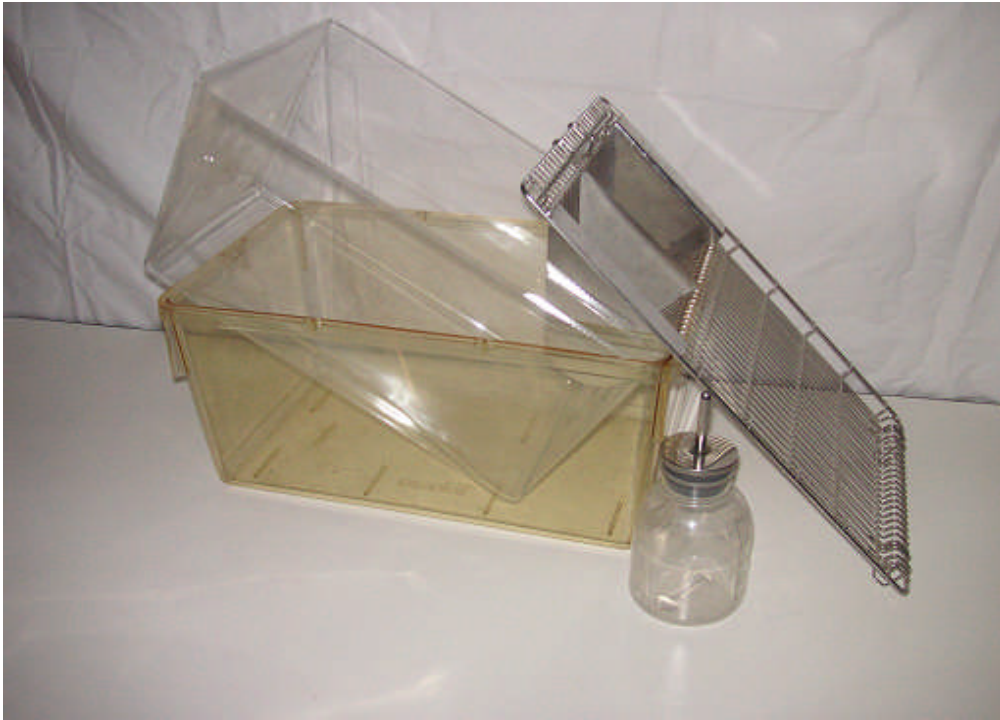

このケージは従来ご使用のポリカーボネート及びTPX等のケージの中に入れて使用いたします。

床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。

サイズ: W405×D245×H200mm 40入 定価: ¥45,000-

注: 価格はケージのみです

特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く燃焼時に有害なガスの発生がないので床敷きを入れたまま焼却が出来ます。

使用されている特殊ポリエステルは、耐放射、電子線素材です。

完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません。

使用されている特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます。

【仕様】ケージ本体: 材質 特殊ポリエステル製

特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60°C以上でのガス滅菌は避けてください。