

マウス・ラット・モルモット電子天秤 SN-860



## 【特徴】

### (1) 平均化機能

特殊フィルターの採用により、絶えず動きまわる実験動物を正確にかつ迅速に計量できます。

### (2) 計量値ホールド機能

実験動物を載せ計量値が一旦安定しますと、表示値がホールド（固定）しますので、データを記録する際非常に便利です。又実験動物を降ろせばホールドが解除され、零点に復帰しますので次回測定のための零点チェックが可能です。

### (3) オートゼロ機能


排泄物などにより、はかりの零点が変化しても自動安定調整（オートゼロ）機能が働き、常に正しい零点を保ちますので、零調整（T）ボタンを操作する必要がなく、次の計量にかかることができます。

定価： ¥180,000

## 仕様

形名	SN-860
用途	マウス・ラット・モルモット
ひょう量	3100g
最小表示	0.1g
表示	蛍光表示管（最大7桁）
測定方法	音叉振動式
内蔵分銅	有り
出力	RS232C標準装備
仕様温室度	0～40℃、80%Rh以下
電源	専用ACアダプタ（12V）
計量箱	アルミ製 180φ×150mm

## 専用プリンター SN-864

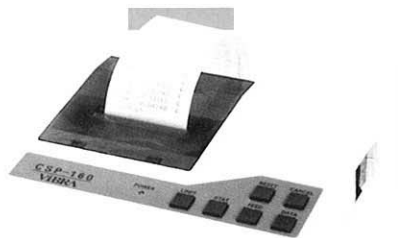

- 時計内蔵により日時の印字可能
- データを分析するヒストグラム機能
- ISO/GLP/GMP対応の印字可能（はかりが機能を有する機種のみ）
- 計量後にデータを自動印字
- 標準偏差、平均値、不良率、合計等の自動印字可能

定価： ¥65,000