



小動物用経口ゾンデ フレキシブルかみ切り防止タイプ

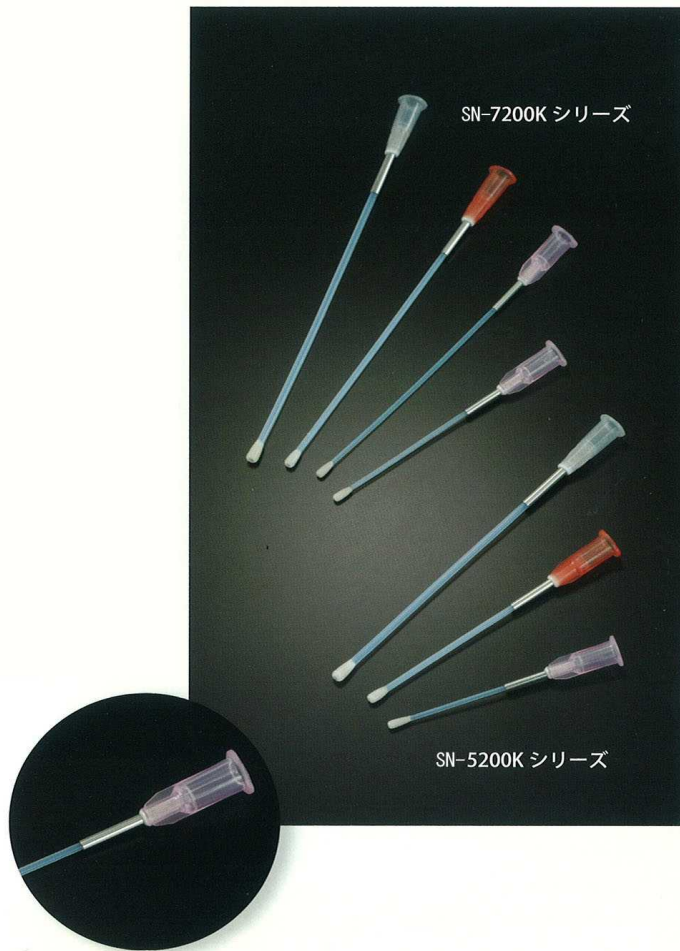

弾力性のあるシリコン先玉とPTFEチューブを接続し、針基付近のチューブ部分はステンレスパイプで覆われている商品です。

1. 試験薬物投与時の実験動物によるチューブの噛み切りが最大限防止できます。
2. 適度な弾力性とコシの強さを有し、肺・気管への誤投与や近接諸臓器損傷する心配がなく、実験動物に優しい経口ゾンデとして多くの研究者から注目されています。
3. 材質は耐薬品性などあらゆる面から厳選し、試験薬物との相互影響が最小限になるものを採用しています。
4. 5本ずつの小口包装・EOG滅菌により、必要な数量だけ使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。

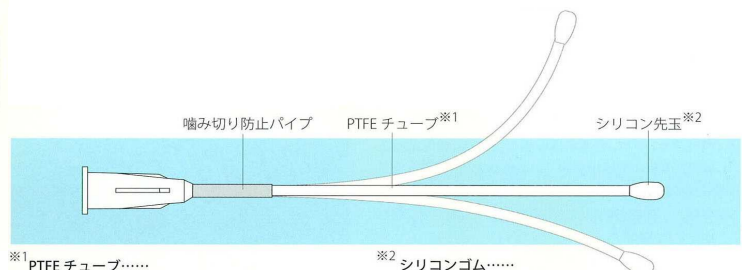

※1 PTFE チューブ……
化学薬品に対して優れた抵抗を示し、酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤にも浸されない特性を有します。
PP・PE チューブ材よりも、数倍優れています。

※2 シリコンゴム……
無味・無臭・無毒で化学的に不活性であり、食品・医療・理化学方面で使用されています。

SN-5200/7200シリーズ

(単位: mm)


Cat No.	針基色	針長	先玉	外径×内径	噛み切り防止パイプ長	規格	販売単位
5202K	●	38	2.0	1.18×0.68	11	マウス用	1箱:250本入 (1パック5本×50パック)
5204K	●	52	2.4	1.46×0.86	13	ラット用	
5206K	●	78	2.8	1.79×1.19	15		
7202K	●	50	2.0	1.18×0.68	11	マウス用	
7204K	●	75					
7206K	●	85	2.4	1.46×0.86	13	ラット用	
7208K	●	100	2.8	1.79×1.19	15		

本製品は実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。


株式会社 シナノ 製作所

小動物用経口ゾンデ

フレキシブルタイプ

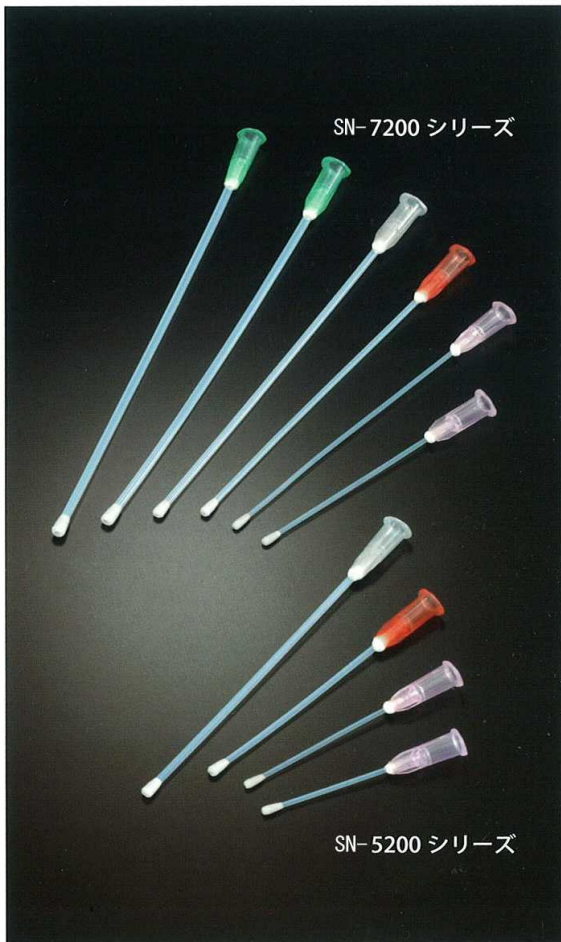

1. チューブは他の素材に比べしなやかなPTFE、先端はソフトな球状シリコンを採用しています。
2. PTFEチューブは、半透明で試験薬物の確認が容易です。
3. PTFEチューブは任意に湾曲加工が出来る特性を持つ為、肺・気管への誤投与や近接諸臓器を損傷するトラブルが軽減出来ます。
4. 多種の小型実験動物に対応できるよう、各サイズ取り揃えております。
5. 5本ずつの小口包装・EOG滅菌により、必要な数量だけ使用でき、洗浄・滅菌の手間が掛かりません。

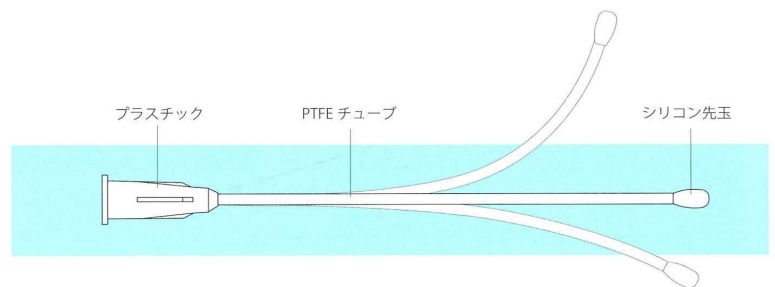

SN-5200シリーズ

(単位:mm)

Cat No.	針基色	針長	先玉	外径×内径	規格	販売単位
5200S	●	30	1.9	0.90×0.50	マウス用	1箱:250本入 (1パック5本×50パック)
5200		38				
5202SS	●	25	2.0	1.18×0.68		
5202S		30				
5202		38				
5204	●	52	2.4	1.46×0.86	ラット用	
5206	●	78	2.8	1.79×1.19		

※未滅菌商品もあります
5200S・5200はPFA使用

SN-7200シリーズ

(単位:mm)

Cat No.	針基色	針長	先玉	外径×内径	規格	販売単位
7202	●	50	2.0	1.18×0.68	マウス用	1箱:250本入 (1パック5本×50パック)
7204		75				
7206	●	85	2.4	1.46×0.86	ラット用	
7208	●	100	2.8	1.79×1.19		
7210	●	110	2.9	2.10×1.50	ラット&モルモット用	1箱:200本入 (1パック5本×40パック)
7212		120				

※未滅菌商品もあります

本製品は実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ製作所

小動物用経口ゾンデ

ステンレスタイプ



1. 残留薬物によるトラブルが少なく、安心して使用できるディスポーザブル(使い捨て)製品です。
2. チューブはステンレス細管で簡単に湾曲加工ができる為、初心者でも容易に投与できます。
3. 先端は球状シリコンで弾力性があり、食道へスムーズに投与できる為、肺・気管への誤投与や近接諸臓器を損傷するトラブルが軽減できます。
4. 5本ずつの小口包装・EOG滅菌により、必要な数量だけ使用でき、洗浄・滅菌の手間が掛かりません。

SN-4200シリーズ

(単位:mm)

Cat No.	針基色	針長	先玉	外径×内径	規格	販売単位
4202	●	38	1.9	0.92×0.62	マウス用	1箱:100本入×5箱 (500本)
4204	●	52	2.3	1.20×0.83	ラット用	
4206	●	78	2.9	1.81×1.45	ラット&モルモット用	

※未滅菌商品もあります

SN-6200シリーズ

(単位:mm)

Cat No.	針基色	針長	先玉	外径×内径	規格	販売単位
6202	●	70	1.9	0.92×0.62	マウス用	1箱:500本入
6204	●	80	2.3	1.20×0.83	ラット用	
6206	●	95	2.9	1.81×1.45	ラット&モルモット用	1箱:250本入×2箱 (500本)

※未滅菌商品もあります

本製品は実験動物研究用であり、臨床用には使用できません。

株式会社 シナノ製作所